




Wyposażamy, projektujemy, wspieramy
podchodzimy kompleksowo do wdrożeń technologii u naszych Klientów



Wspomagamy naszych klientów na wszystkich etapach inwestycji: od projektu i pozyskiwania środków, po dostawę urządzeń, serwis i wsparcie merytoryczne nowych użytkowników.

Wiedza i doświadczenie naszych specjalistów pozwalają Państwu skupić się na tym, co najistotniejsze: efektywnym wykorzystaniu sprzętu w prowadzonych badaniach i projektach.

 **Technomex**

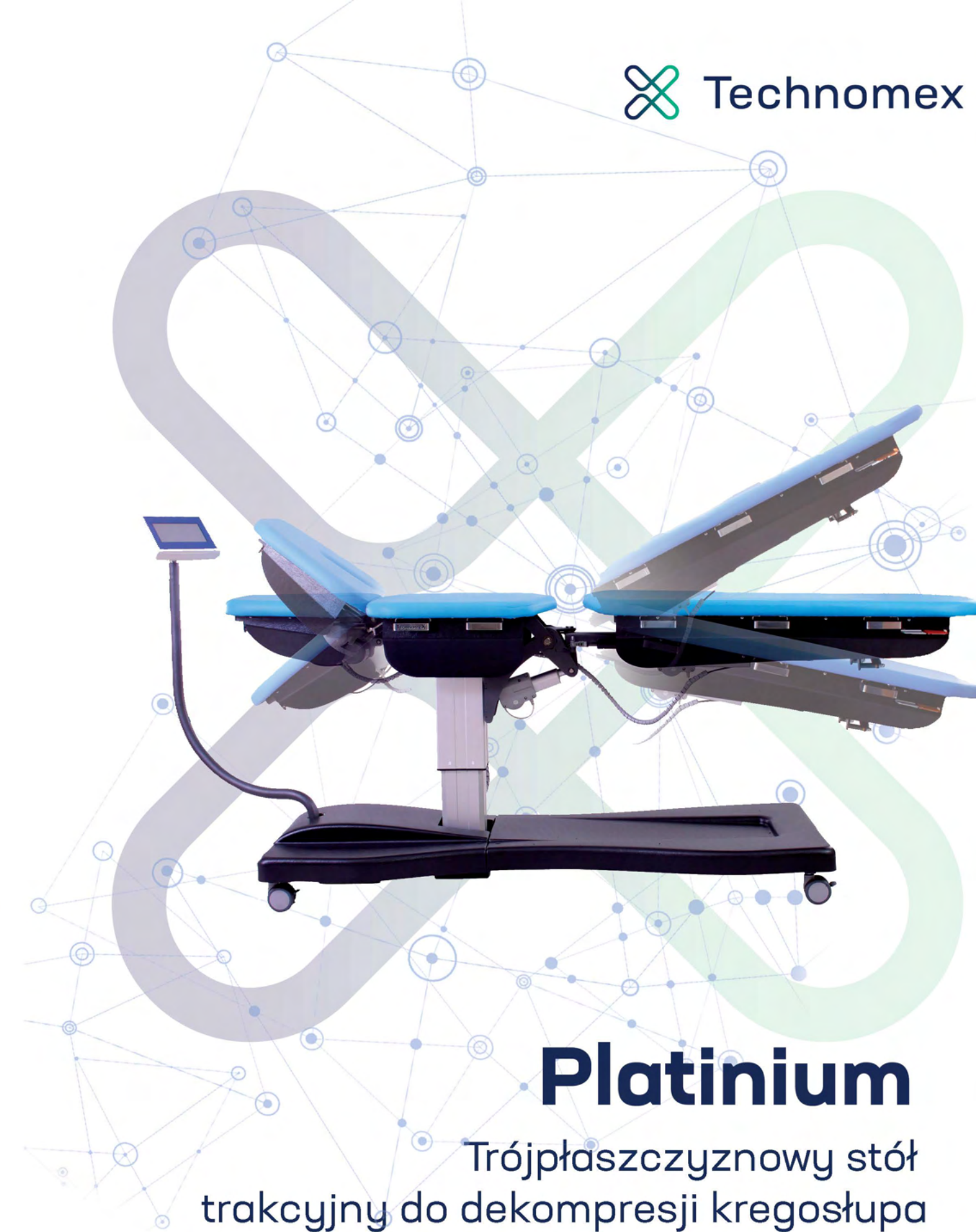

Platinum
Trójpłaszczyznowy stół
trakcyjny do dekompresji kregostupa

Platinum 3D

3D - trójpłaszczyznowa korekcja leżyska umożliwia przyjęcie bezbolesnej pozycji, rozluźnienie napiętych mięśni, a w konsekwencji skuteczniejszy zabieg przy użyciu mniejszej siły.

Platinum precyzyjnie kontroluje dozowanie siły trakcji - pomiar siły realnie oddziaływującej na tkanki pacjenta (nie generowanie przez siłownik). Reakcje w czasie rzeczywistym na zmiany oporu ciała pacjenta dostosowanie siły.

Trakcja 3D



Rozsuwane leżysko - zniwelowanie siły oporu związanego z tarciem umożliwia pracę w większym zakresie sił (od niższych do maksymalnych).



 **Technomex**
Pomagamy
dzięki technologii

T. 32 40 10 350
M. biuro@technomex.pl
W. technomex.pl

A. PHU Technomex Sp. z o.o.
ul. Szparagowa 15,
44-141 Gliwice

f facebook.com/technomex
@ instagram.com/technomexpl
▶ youtube.com/phutechnomex

02.02.2024-Platinum-tryptyk

Produkty i informacje zawarte w niniejszym katalogu kierowane są do specjalistów. Są to wyroby medyczne, które powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel. Używaj zgodnie z instrukcją.

Platinum

Trójplaszczynowy stół trakcyjny do dekompresji kręgosłupa



Nowoczesny stół do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego z możliwością trójplaszczynowej korekcji ułożenia leżyska za pomocą precyzyjnych sprężyn gazowych.

Dozowanie siły w oparciu o realny opór tkanek pacjenta w czasie rzeczywistym zapewnia bezpieczeństwo i zwiększa efektywność zabiegu.

Platinum umożliwia wykonanie trakcji o zmiennym przebiegu siły w czasie, w celu zróżnicowania efektów zabiegu (statyczna, harmoniczna, przerywana) oraz daje możliwość kreowania trakcji cyklicznej.

Dotykowy ekran znacząco ułatwia obsługę urządzenia, a kartoteka pacjenta pozwala na szybki

dostęp do informacji o postępie w terapii oraz parametrach użytych w sesjach zabiegowych.



Stół Platinum

Korzyści dla pacjenta



Właściwości:

- dostosowanie pozycji pacjenta do jego aktualnych potrzeb w celu zwiększenia efektywności zabiegu
- korekcja ustawienia leżyska w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej umożliwiające ułożenie pacjenta w pozycji antalgicznej oraz ukierunkowanie siły trakcji na wybrany segment kręgosłupa
- precyzyjne dozowanie siły trakcji dostosowywane do oporu tkankowego ciała pacjenta w czasie rzeczywistym
- bezpieczna i funkcjonalna trakcja szyjna (zastosowanie klinów potylicznych umożliwia eliminację obciążeń dla stawów skroniowo-żuchwowych)
- rozsuwana elektrycznie część lędźwiowa leżyska niwelująca siłę tarcia pacjenta względem stołu
- opcja trakcji symetrycznej lub asymetrycznej
- możliwość wykonania zabiegu w pozycji supinacyjnej lub pronacyjnej,
- dowolna regulacja parametrów: siły ciągu, prędkości narastania ciągu, czasu trwania przerwy, czasu aktywnej trakcji (w trybie trakcji przerywanej)
- możliwość konfiguracji sekwencji faz trakcji w trakcie pojedynczego zabiegu
- bezpieczne dozowanie siły trakcji z granicznymi wartościami sił dla poszczególnych trybów trakcji

Wskazania:

- Zespoły korzeniowe o różnym pochodzeniu, w tym ostre
- Ból dyskogenny, zwłaszcza wypuklina miękka
- Ból stawowy / zablokowania stawów kręgosłupa
- Choroby krążka międzykręgowego
- Rwa kulszowa
- Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
- Hypomobilność stawów
- Nadmierne napięcie mięśni przykręgosłupowych

Dodatkowo:

- możliwość tworzenia własnych programów terapeutycznych
- kartoteka pacjentów, pozwalającą na uzyskanie szeregu informacji o postępach w terapii, użytych parametrach w sesjach oraz z możliwością zapisania odczuć pacjenta w skali VAS
- kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" na ruchomym wysięgniku
- komfort pacjenta w trakcie zabiegu oraz ergonomia pracy dla terapeuty
- możliwość wybrania koloru tapicerki

Platinum

Właściwości



Konfiguracja:

rodzaj trakcji	● statyczna, harmoniczna, przerywana oraz cykliczna
maksymalna siła trakcji odcinka szyjnego	● 18 kg
maksymalna siła trakcji odcinka lędźwiowego	● 90 kg
możliwość regulacji parametrów	● rodzaju trakcji, siły, prędkości narstania, opadania, czasu zabiegu, czasu fazy aktywnej i czasu przerwy
możliwość programowania	● możliwości zaprogramowania sekwencji faz trakcji w trakcie pojedynczego zabiegu
wyświetlacz	● dotykowy, kolorowy o przekątnej 7"
regulacja zagłówka	● od -44° do +36°
regulacja części lędźwiowej w płaszczyźnie strzałkowej (ruch - zgięcie / wyprost)	● od -14° do +22°
regulacja części lędźwiowej w płaszczyźnie czołowej (ruch-skłon do boku)	● od -20° do +20°
regulacja części lędźwiowej w płaszczyźnie poprzecznej (ruch - rotacji)	● od -12° do +12°
maksymalne obciążenie stołu	● 150 kg
zakres regulacji wysokości stołu (mm)	● 580 do 880
wymiary: dł x szer (mm)	● 2270 x 730



Standardowe wyposażenie:

- komplet akcesoriów (2 pasy: pas stabilizujący odcinek lędźwiowy, pas stabilizujący odcinek piersiowy, podnóżek regulowany i stół z rozsuwanym leżyskiem)
- pilot bezpieczeństwa - możliwość przzerwania przez pacjenta zabiegu w dowolnym jego momencie

